

Produktdatenblatt

Palas® Verdünnungssystem VKL 27 Mobility Particle Sizer (U-SMPS)



Anwendungen

- Die VKL 27 ist speziell entwickelt für die Qualitätskontrolle von Atemschutzmasken.

Andere Anwendungen:

- Aerosolmesstechnik: Dieselabgase, Schleifstäube, Kühlschmiermittelaerosole, Schweißrauch, Öltröpfchen, Prüfaerosole von Filtern und Trägheitsabscheidern
- Abscheidegradbestimmung mit zählenden Messverfahren, z. B. bei Staubfiltern, HEPA / ULPA Filtern
- Lecktest und Abnahmemessungen von reinen Räumen, Isolatoren und Sicherheitswerkbänken
- Inhalationstoxikologie
- Qualitätskontrolle von Filterkassetten

Vorteile

- Repräsentative Verdünnung bezüglich der Partikelgrößenverteilung der Palas® Verdünnungssysteme bei Kaskadierung
- Bereits im VDI-Bericht Nr. 1973, 2007 wurde messtechnisch nachgewiesen, dass mit den Palas® Verdünnungssystemen eine reproduzierbare Aerosolverdünnung bis zu VF 100.000 möglich ist.
- Die Verdünnungssysteme von Palas® sind eindeutig charakterisiert. Dies wird durch ein Kalibrierzertifikat für jedes einzelne Gerät nachgewiesen.
- Die Verdünnungsstufen liefern eine zeitlich konstante, repräsentative Verdünnung mit dem Faktor 10 bzw. 100.
- Die Verdünnungssysteme können mit den Faktoren 100, 1.000, 10.000 und 100.000 kaskadiert werden
- Geringer Druckluftverbrauch (z. B. nur 128 l/min bei einem Verdünnungsfaktor von 10.000 mit vier VKL 10 Systemen)
- Die Verdünnungsstufen sind mit allen gängigen Partikelzählern kombinierbar.
- Mit einem simplen Testaufbau können diese kaskadierten Verdünnungssysteme vom Anwender selbst überprüft werden.
- Isobare Verdünnung bis 10 bar Überdruck / isotherme Verdünnung bis 120°C bei Verdünnungssystemen VKL 10 E, VKL 10 ED, KHG 10 und KHG 10 D

Beschreibung


Mit den Palas® Verdünnungssystemen der Serie VKL 27 kann die Konzentration von Aerosolen, auch von sehr hoch konzentrierten Aerosolen, definiert und zuverlässig um den Verdünnungsfaktor 1:27 herabgesetzt werden.

Die Palas® Verdünnungssysteme VKL 27 wurden speziell für die Applikation zum Testen von Gasmasken entwickelt, wobei der Verdünnungsfaktor von 1:27 benötigt wird.

Die VKL-27 ist zusätzlich mit einer Spezialverdünnungseinheit ausgestattet.

Mittels Kaskadierung von mehreren VKL Systemen können höhere Verdünnungsfaktoren erreicht werden.

Funktionsprinzip

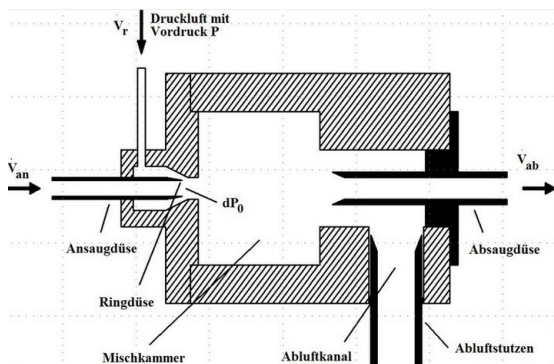

Die Ansaugdüse wird durch einen Ringspalt mit partikelfreier Luft mit dem Volumenstrom V_R umströmt. Dadurch wird nach Bernoulli ein Volumenstrom V_{An} in der Ansaugdüse erzeugt.

Der Verdünnungsfaktor V_F wird berechnet nach der Formel:

$$V_F = \frac{(\dot{V}_R + \dot{V}_{An})}{\dot{V}_{An}}$$

Einfacher Funktionstest vor Ort

Mit diesem simplen Testaufbau können die kaskadierten Palas® Verdünnungssysteme von jedermann selbst überprüft werden:

Dazu wird als erstes eine Partikelmessung mit einer Verdünnungsstufe durchgeführt. Wichtig hierbei ist, dass die zu messende Aerosolkonzentration, z. B. Laborluft, das Konzidenzlimit (maximal detektierbare Aerosolkonzentration) des Partikelmessgeräts nicht überschreitet. Im zweiten Schritt wird die zu testende Verdünnungsstufe in Reihe angeschlossen (Kaskadiert). Zur Überprüfung des Verdünnungsfaktors der Teststufe (Pos. 2) wird die Gesamtpartikelanzahl aus der Messung Pos. 1 durch die Gesamtpartikelanzahl aus der Pos. 2 dividiert.

Versuchsaufbau



Position 1: Laborluft



Position 2: Laborluft

Das VKL 100 dient der koinzidenzfreien Messung mit dem OPC; das VKL 10 wird getestet.

Messbeispiel

Partikelklasse in μm	Anzahl Pos.1	Partikelklasse in μm	Anzahl Pos.2
0,2	151648	0,2	15166
0,3	71604	0,3	7290
0,5	4305	0,5	524
0,7	360	0,7	65
1,0	82	1,0	21
2,0	16	2,0	3
3,0	1	3,0	0
5,0	0	5,0	2
Summe	228016	Summe	23071

Berechnung des Verdünnungsfaktors

$$V_F = \frac{N_{GesPos1}}{N_{GesPos2}} = 9,88$$

Sofern die erste Messung nicht mit einem Koinzidenzfehler behaftet war und das zu testende Verdünnungssystem funktioniert (nicht verschmutzt ist) wird ein Verdünnungsfaktor von nahezu 10 ermittelt.

Sollte dieses nicht der Fall sein, war eventuell die Messung 1 in Koinzidenz. In diesem Falle ist die Aerosolkonzentration herab zu setzen oder eine weitere Verdünnungsstufe zu verwenden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die zu

testende Verdünnungsstufe verschmutzt ist. In diesem Fall ist das Gerät zu reinigen und der Test zu wiederholen.

Technische Daten

Verdünnungsfaktor	1 : 27
Isokinetische Absaugdüsen	0,045 l/min, 0,3 l/min, 3,5 l/min, 9 l/min, 28 l/min, 50 l/min
Maximale Partikelgröße	< 10 µm (für Stäube)
Druckluftversorgung	4 - 8 bar